

健康で快適な生活を提案する

マルタカ

健やかは
からだの真ん中、
お尻から。



Zappino
座ッピーノ



販売名：おしりマッサージ器 D-972
医療器認証番号：222AKBZX00113000



お尻だって 太ももだって、疲れてる



手軽でおしゃれな **座ッピーノ**で、
たまってしまふ疲れやコリをとしましょう。

- 使用目的・効能効果●
- あんま、マッサージの代用
- 一般家庭で使用すること

7分間の
自動たたき
マッサージ



6段階の強さ

部位にあわせて
つよさも、座面幅
も、調節可能



30種のリズム

さざ波パイルーション
から8ビートやドンドン
叩きまで血行を促進し、
疲労回復



4つで「たたき」

Zappino

座ッピーノ



標準小売価格
50,000円 + 消費税

1年間責任保証

主な仕様

- 管理医療機器 機械器具 (77) パイプレーター
- 家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード34662000)
- 販売名: おしりマッサージ器 D-972
- 医療機器認証番号: 222AKBZX00113000
- 機種名: D-972 ●定格電圧: AC100V ●定格周波数: 50/60Hz ●定格消費電力: 20W ●定格時間: 7分
- 本体寸法: 縦500×横500×厚さ135 (mm)、質量約4.3kg ●安全装置: 過電流防止装置/温度制御装置
- JANコード: 4582310180055

電気用品安全法技術基準
適合確認済

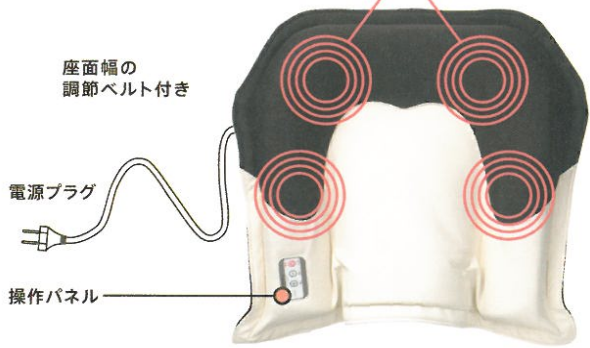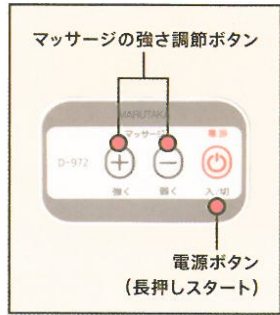

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 次の人は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている人 (例) 血栓 (塞栓) 症、重度の動脈けいゆう、急性静脈けいゆう、各種皮膚炎および皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む) など/施療部に疾患がある人
- 外装カバーが破れたり、外れたままでは使用しないでください。
- お子様やご自分で意志表示のできない方には、使用しないでください。
- 頭部、のど、首や胸部、関節部には絶対に使用しないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたとき、しばらく使用しても効果が現れない場合は、すぐに使用を中止してください。
- 万一本器に異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

- 次のような場合もしくは身体に異常のある人は医師に相談された上、その指示に従ってください。ペースメーカー等の電磁傷害の影響を受けやすい体内植込み型医療電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/高血圧症の人/心臓に障害 (狭心症、心筋梗塞など) のある人/妊娠初期不安定期、または出産直後の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/施療部に重度の血行障害のある人/施療部位に創傷またはかつて治療を受けた疾患部のある人/背骨に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人/脊椎の骨折、急性疼痛性疾患、捻挫、肉離れ等炎症性の人、骨粗鬆症、腱鞘炎の人/体温38℃以上 (有熱期) の人 (例1) 急性炎症症状 (倦怠感、悪寒、血圧変動など) の強い時期 (例2) 衰弱しているとき/安静を必要とする人/体調のすぐれない人/現在健康でも、骨や内臓に起因する腰痛の人、加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人、打ち身や捻挫しやすい人/その他、身体に異常のある人や医師の治療を受けている人

《製造販売業者》
株式会社デンケン
大分県国東市武蔵町手野1560



マネジメントシステム認証取得
Certified Management System・ISO13485
株式会社デンケン/ML事業部はISO13485認証取得工場です

お問い合わせは

株式会社 マルタカ

東京都中央区銀座6-16-12丸高ビル

0120-224-027

平日9時~17時受付 (祝祭日、当社の休日を除く)

http://www.marutaka.co.jp

お取扱店