


健康で快適な生活を提案する

マルタカ

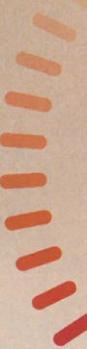

ひざ痛には「ひざケア」 やさしくつつみこんで ひざをサポート

ひざのつらい痛みをつつみこんで解消します。



MARUTAKA
TECHNO

「スイープ変調波電流」とダイレクトにサポートしてくれる「ひざ専用ソーター」が特徴
快適な健康生活のための新しい提案“ひざケア”



ひざケア


一般的名称：家庭用低周波治療器

医療機器認証番号：221AGBZX00310000

機種名：SM1MT

デザイン及び形状は予告無く変更する場合があります。

ひざ痛の主な原因

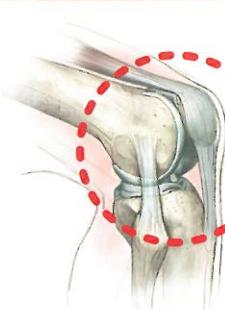

体重増加

体重増加や肥満化は、ひざへの負担を倍速で進めていってしまいます。自分だけは大丈夫と思い込む前にひざに痛みを感じたら、すでに危険信号です。

運動不足と過度な運動


運動不足は動かないことで筋肉衰退を進めひざ関節に負担を与えます。また過度な運動は過ぎることで許容量以上の負担をひざ関節に与えてしまいます。

加齢による身体の老化

加齢とともにはじまる身体の老化は、体重や身体の動きを支える負担が関節に集中し、軟骨に大きなダメージを与える現象を起こしやすくなります。

ひざケアのアイデアと新技術

● スイープ変調波電流

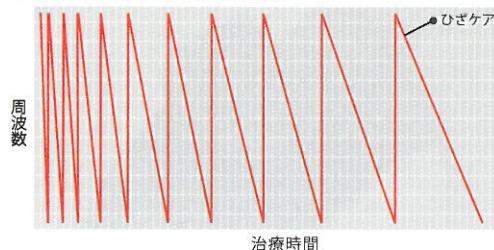

ひざ治療のメカニズムは複雑で、種々の周波数が関係していると言われています。スイープ変調波電流は作用効果を高めるために治療電流周波数4000Hzの波形をAM変調し、それを50~1000Hzの間で自動可変(スイープ)したスイープ変調波で、幅広い痛みへの対応とより深い部分への治療効果を充実させる当社独自のテクノロジーです。

● 音声ガイダンス機能

ひざケアの“音声ガイダンス機能”は、操作の確認をするだけでなく、音声ガイダンスにより、より分かりやすく、効果を高めるようご案内します。



● ひざ専用治療器

これまでの家庭用低周波治療器は、ひざ直接ではなく、太もものひざ寄りの筋肉を刺激し血流改善を行うものでした。ひざケアは、独自のセンター構造で、ひざ関節を包み、ひざ患部をダイレクトに刺激し、ひざの痛みの改善を狙った初めての家庭用ひざ専用治療器なのです。



ひざの痛みは、我慢することより、痛みを和らげながら、適度な日々の運動を行う事が肝心と言われています。心地よい刺激と使いやすさを実現したひざケアをお試しください。

● 湿式スponジパット



● 三重構造 / ひざの複雑な痛みのポイントを逃しません。



株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスパックの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年版認証を取得しています。



安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
ベースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器/人工心肺等の生命維持用医用電気機器/心電計等の装着型医用電気機器/他の治療器や電気製品
- 次のような場合、もしくは身体に異常のある方は、医師に相談の上、指示に従ってください。
心臓に障害のある方/悪性しゅよう腫瘍)のある方/体温38℃以上の(有熱期)の方/脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の方/妊娠初期の不安定期または出産直後の方/糖尿病などによる末梢循環障害による知覚障害のある方/温度感覚喪失が認められる方/適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある方/安静を必要とする方や体調のすぐれない時/その他、身体に異常を感じている時
- 次のような部位への使用は避けてください。症状が悪くなる場合があります。
頭部/陰部/口腔/皮膚疾患部/心臓の近く
- 身体の不自由な方や寝たきりの方は、必ず介護される方が付き添って使用してください。
- 使用しても効果が表れない場合や、身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障等が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

製品仕様

一般的名称：家庭用低周波治療器
販売名：ひざケア
機種名：SM1MT
定格電圧・電流：DC6V/300mA
ACアダプター (AC100V 50-60Hz)
出力電流：20mA 以下
タイマー：30分
本体質量：約 115g (寸法単位 mm)
本体寸法：H:26.5/D:125/W:8.8

● 製造販売

株式会社 マルタカテクノ

静岡県藤枝市八幡広通 550-1

● お問い合わせは

株式会社 マルタカ

東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル
<http://www.marutaka.co.jp>

0120-224-027
Free Dial

平日 9時～17時受付 (祝祭日、当社の休日を除く)

標準小売価格

65,000円

※ 標準小売価格はお取扱店の設定価格です

● お取扱店