

つらい肩コリや筋肉萎縮に。  
スクランブル通電の心地よい刺激が、  
気になるところに作用する電子治療器。

# からだの爽快。から スッキリ


## スクランブル ウェーブDX

販売名／スクランブルウェーブDX（機種名IFW-01ML）、医療機器製造販売認証番号／21000BZ00419A06、区分・類別／管理医療機器家庭用電気治療器、一般的の名称／家庭用低周波治療器（JMDNコード70986000）、電源電圧／AC100V、定格周波数／50-60Hz、消費電力／28W、定格時間／30分、外形寸法／縦290×横380×高さ155mm、質量／約4kg（本体）、安全装置／タイマー・ソフトスタート・ヒーター温度過昇防止機能、電気の安全性／電気用品安全法技術基準適合確認済

【スクランブルウェーブDXの使用目的・効果効能】 一般家庭で使用すること。

### 肩こりの緩解、痺痺した筋肉の萎縮の予防およびマッサージ効果

広く普及しているパルス通電（低周波）と、皮膚表面や神経を過度に刺激することなく深部の痺痺した筋肉に作用して萎縮を防止するスクランブル通電。スクランブルウェーブDXは、独自の技術によって、この2つの通電治療に加え、さらにトレーニングモードを備えました。

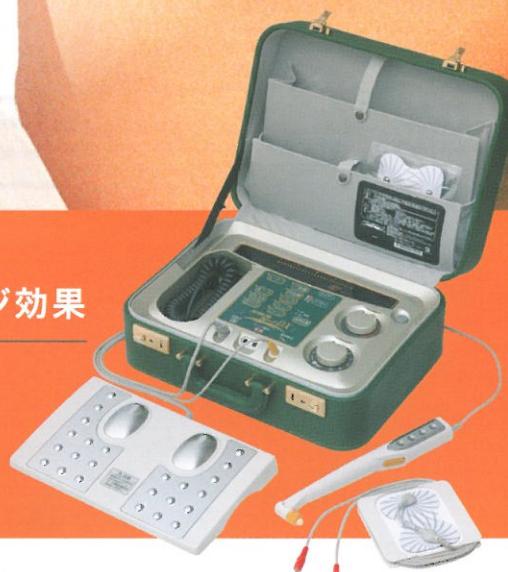

標準小売価格 ¥370,000

## なぜ電子治療が効果を発揮するのでしょうか？

私たちのからだの血液中には電気を帯びた物質が含まれています。もし何らかの原因で体内の電流が滞ると、様々な不調を招きます。からだへの適度な通電刺激は、マッサージ効果として体内の血行を促進し、コリや痛みをやわらげ疲労を回復します。

## スクランブルとパルス、Wの通電治療でさらに効果アップ！

電気療法の歴史は古代エジプトまで遡るといわれ、1902年にフランスでパルス通電治療器が登場しました。さらに、4つの電極を採用し、強く、深く刺激を与えるスクランブル通電が開発され、効果は飛躍的に高まりました。

## 7つの治療と2つのトレーニングが、バッグに入った実力派

T治療 M治療 スクランブル + Sトレーニング Dトレーニング

パッド導子はどこでもピタッと貼れる満足の大きさです。




肩や腰の広い部位もカバーできる2つの大きなパッド。右脚と左脚、両腕など2カ所が同時に治療できます。肘やひざの関節を包み込むように貼ると、強く、深く奥までしっかりと刺激することができます。



### 局所治療

良導点※を探知して、効果的な局所治療を。

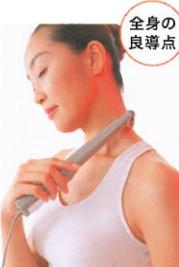

良導点を探知し、そのままボタン1つで集中治療ができる局所導子。首筋やこめかみなど、パッド導子の貼りにくい部位にも使いやすいペン型です。

※良導点とは身体の中で電気の流れやすい部分

### 足コース 足たたき 足スクランブル

ヒーター内蔵、足元から楽々しっかりと治療。



ツボや全身の反射区があるといわれる足の裏を足導子にのせれば「足スクランブル」治療ができます。自動プログラムの「足コース」、リズミカルな刺激が血行を促す「足たたき」も選べます。




### 安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。  
ベースメカ一、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器／人工心肺等の生命維持用医用電気機器／心電計等の装着型医用電気機器／他の治療器や電気製品
- 次のような場合、もしくは身体に異常のある方は、医師に相談のうえ、指示に従ってください。  
心臓に障害のある方／悪性しうよう（腫瘍）のある方／体温38℃以上の（有熱期）の方／脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性疼痛性疾患の方／妊娠初期の不安定期または出産直後の方／糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方／温度感覚喪失が認められる方／適用部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある方／安静を必要とする方や体調のすぐれないとき／その他、身体に異常を感じているとき
- 次のような部位への使用は避けてください。症状が悪くなることがあります。頭部／陰部／口中／皮膚疾患部／心臓の近く
- 身体の不自由な方や寝たきりの方は、必ず介護される方が付き添って使用してください。
- 使用しても効果があらわれない場合や、身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障等が発生した場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。


### T治療

コリ治療に適した「たたき」感主体の自動プログラム。

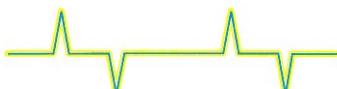


### M治療

痛みの治療に、「もみ」感覚が主体の治療です。

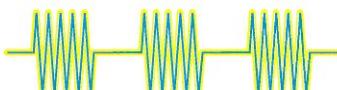


### スクランブル

4極からの電流が交わる広い範囲を複雑な刺激でしっかりと治療します。

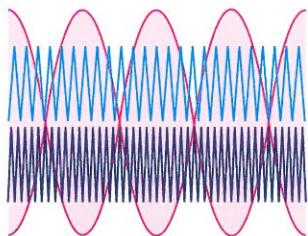

### Sトレーニング

腹筋、側腹筋などの表層の筋肉に。筋肉の収縮・弛緩をゆっくりとしたペースで行います。

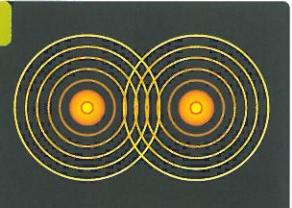

### Dトレーニング

臀筋、大腿筋などの大きく厚い深層の筋肉におすすめのトレーニングモード。筋刺激と休息を繰り返し、強く深く作用します。



### ●操作方法や修理などのご相談は

《製造販売業者》

株式会社 マルタカテクノ

静岡県藤枝市八幡字広通550-1

0120-484-100  
Free Dial

平日9時～18時受付(祝祭日、及び当社の休日を除く)

### ●お取扱店

### ●その他のお問い合わせは

株式会社 マルタカ

東京都中央区銀座6-16-12丸高ビル  
0120-224-027  
Free Dial 平日9時～17時受付(祝祭日、当社休日を除く)  
<http://www.marutaka.co.jp>