

健康で快適な生活を提案する

マルタカ



家族のやさしさと
セルウォームDXの温もりが
健康を支えます。

身体の深部からやさしく広がる
温熱効果で疲労回復、血行促進。

セルウォームDX



すぐにあたたか しつかり温熱実感

いつでもどこでも簡単温熱治療

肩、膝、腰など温めたい部位に、やわらかなパッドをワンタッチ・バンドで固定します。
もちろん、服の上からの簡単装着。
始めは5分から、慣れてきたら10~20分程度と時間も手間もかかりません。



超短波の温熱効果により、
神経痛や筋肉痛の痛みが
やわらぎ、胃腸のはたらきも
活発になります。



パッドを離してご使用の場合、
レベルが低めに表示されます。



関節や肌に直接あたる部位にはパッドカバー、またはタオルをお使いください。




腹・腰



Point 1

ハイパワー&急速加温

最大出力50ワットのハイパワーで、
すぐに温かさが実感できます。
治療開始から約60秒間、最大出力
で急速加温、その後設定出力に下
がります。

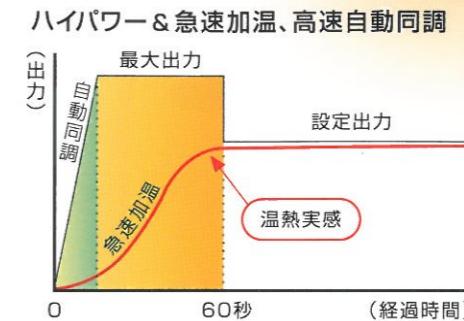


表示パネル



超短波とは

セルウォームDXの治療で効果を發揮する超短波は、1秒間に2,712万回の早さで極性が変わる短い波長の電波(周波数 27.12MHz)です。この電波が身体の中へ透過するときに、細胞に共振運動を起こし、内臓や筋肉・関節など身体の深部を効率よく温めます。そして毛細血管が拡張し、血行がよくなるのです。

分子の共振運動で、摩擦熱が発生

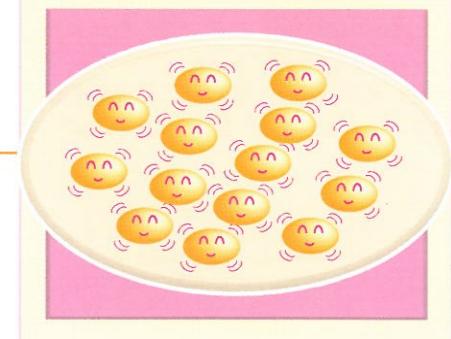

Point 2

高速自動同調

治療部位に合わせた高速自動同調で、
わずらわしい調節はいりません。スタートボタンを押すだけで、あとは
セルウォームDXにおまかせ。いつ
でも効率よく治療効果が得られます。

Point 3


室温センサー内蔵

お部屋の温度を室温センサーが感知して、出力を自動的に補正します。
季節や着衣が変わっても、温感は
いつも安定しています。

Point 4

超短波治療器

手軽にご使用いただける家庭用超短波治療器セルウォームDXは、超短波が身体の深部まで十分透過して、身体の内側からじっくり、やさしく温めます。この温熱効果により、血液循環を促し、身体の疲れやコリをやわらげます。また、胃腸の働きも活発になります。超短波療法は、病院の整形外科やリハビリ施設で広く使われている理学療法です。

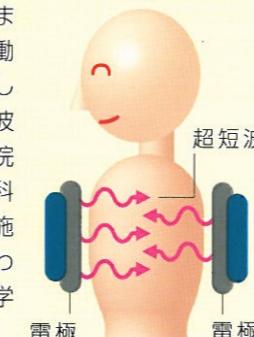

より使いやすく、 安全性を高めた充実機能

シンプルな流線型のボディとモダンなカラーリング、さらにうれしい省スペース設計。
ご高齢の方にも見やすい前面表示パネルと大型ボタンですから、操作が簡単です。
安全停止機能、温度過昇防止機能など充実した安全性を実現しました。

Point 5

低ノイズ設計

ノイズを抑え、テレビやコードレスフォンなど他の家庭電化製品への影響を極力減らしました。(当社比)

セルウォームDX

ハイパワーで高性能、モダンな小型ボディの超短波治療器

●温熱効果

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 胃腸の働きを活発にする

＜家庭用＞超短波治療器 UWM-02M
医療用具承認番号 21100BZZ00681000

仕様

●電源電圧	交流100V
●周波数	50/60Hz
●消費電力	135W
●定格時間	30分
●発振周波数	27.12MHz
●質量	約5kg(本体)
●外形寸法	高さ430×巾170×奥行340mm(本体)
●主な機能	自動同調機能、出力調整(8段階)、急速スタート機能、室温一出力補正機能
●安全装置	タイマー、安全停止機能、温度過昇防止機能、過電流保護装置

*改良のため、予告なく一部仕様変更することがあります。

日本人の肩をもみ続けて40余年。

日本人の肩をもみ続けて40余年。1964年以来、マッサージチェアを送り出してきた健康機器業界のリーディングカンパニー・マルタカ。その実績と信頼を礎に、健康で快適な生活を提案し続けるマルタカの輪は、世界へと大きく広がっています。



マルタカグループの製造を担う、株式会社マルタカテクノは、家庭用マッサージ機、及び家庭用電気治療器（超短波治療器、温熱・電位治療器、電位治療器、低周波治療器）の設計・開発、製造及び販売サービスにおいて、国際標準化機構が制定した品質保証に関するISO9001認証を取得しています。



JQA総合安全認証制度に基づく電気製品の安全性に関する認証を取得しています。
登録モデル: UWM-02



足裏にも、どうぞ。



冷える季節には、
靴下をはいた両足を
足裏から温めるのも
効果的です。
(この場合、出力レベルは
下がります。)



バットカバー/2枚組み
¥2,000(税込¥2,100)

標準小売価格 ¥320,000

●電気代：お一人15分、ご家族4人でお使い頂いた場合、一ヶ月の電気代はわずか80円です。(概算料金につき、ご使用の地域や条件により異なります。)

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
ベースメーカー等の体内埋込型医用電子機器／人工心肺等の生命維持用医用電子機器／心電計等の装着型の医用電子機器／他の治療器や電気製品
- 次のようなところへの使用は避けてください。症状が悪くなったり、やけどの原因になります。
内出血を含む出血部位／月経時の腹部／頭部／男性生殖器／体内に金属やプラスチックを埋め込んであるところ
- 次のような場合もしくは身体に異常のある方は、医師に相談された上、その指示に従ってください。
心臓に障害のある方／急性(疼痛性)疾患の方／悪性腫瘍のある方／熱の高い方／妊娠している方／知覚障害のある方／血圧に異常がある方／安静を必要とする方／血管障害のある方／体調のすぐれない方
- 金属性のもの(貴金属、装身具、金属糸・導電性繊維入りの服等)は、取り外してください。
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 本品に万一故障など発生の場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。



安全に関する
ご注意

●製造・輸入販売

株式会社 マルタカテクノ

静岡県藤枝市八幡広通550-1

株式会社 マルタカ

東京都中央区銀座6-16-12 丸高ビル

<http://www.marutaka.co.jp>

0120-224-027

Free Dial 平日9時～17時受付(祝祭日、及び当社の休日を除く)

●お問い合わせは